

Weichverpackungen

für Dampf- und VH₂O₂-Sterilisation



**EIN KOMPLETTES SORTIMENT AN
WEICHVERPACKUNGEN**

ALLES ABGEDECKT

STERIS bietet jetzt ein komplettes Sortiment an Weichverpackungen, um Sie bei der Aufrechterhaltung der Sterilität Ihrer Medizinprodukte zu unterstützen.

Unsere Weichverpackungen entsprechen einschlägigen internationalen Standards und weisen eine Bakterienfiltrationseffizienz (BFE) von 99% auf, die eine effektive Entfernung und das Eindringen von Sterilisationsmitteln ermöglicht und gleichzeitig als wirksame mikrobielle Barriere dient.

Es sind drei unterschiedliche Materialien verfügbar, um Ihre individuellen Dampf- und VH2O2-Sterilisationsanforderungen abzudecken - von der AEMP bis in den OP.

KOMBINIEREN SIE NACH BELIEBEN

Bei Bedarf können verschiedene Weichverpackungsmaterialien in Kombination verwendet werden, um während des Sterilisationsprozesses zusätzlichen Schutz zu bieten.

Beispielsweise kann die Weichverpackung aus Krepp, die eine hohe Feuchtigkeitsabsorption aufweist, mit der Weichverpackung aus SMS kombiniert werden, die die stärkste Reißfestigkeit bietet.

Krepp Weichverpackung

Ausgezeichnete Barriereigenschaften bei hoher Feuchtigkeitsabsorptionsfähigkeit

- Diese vielseitige Weichverpackung besteht zu 97% aus Zellulosefasern und verfügt über eine gewundene Bahn, die eine Bakterienbarriere bildet und hervorragende Sterilität gewährleistet, um das Durchfeuchten der Verpackungen zu verhindern.
- Latexfrei und in zwei verschiedenen Stärken und Farben erhältlich.
- Kann einzeln oder in Kombination mit anderen Arten von Weichverpackungen verwendet werden.



Wetlaid Weichverpackung

Weicheres und stärkeres Material auf Zellulosebasis

- Diese weiche und dennoch robuste Weichverpackung besteht aus 70% Zellulose, 20% synthetischem Bindemittel und 10% PET-Fasern und unterstützt die Feuchtigkeitsabsorption.
- Ein fusselfreies, leistungsstarkes Material, geeignet für mittlere und große Sets.



SMS Weichverpackung

Robust und langlebig, fusselfrei und mit hoher Bakterienfiltrationseffizienz (BFE)

- Drei Lagen mikroskopisch kleiner Fasern im Meltblown-Verfahren bilden eine gleichmäßige mikrobielle Barriere, um die Sterilität jeder Schicht zu gewährleisten und Ihre medizinischen Instrumente zu schützen.
- Bietet ausgezeichnete Zugfestigkeit und optimale Reißfestigkeit.

Vielseitig – Für den Einsatz sowohl in der Dampf- als auch in der VH2O2-Modalität ist die SMS Weichverpackung in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, sodass Sie die für Ihre Anforderungen beste Option finden können.



BONDED

Effizienzsteigerung – Die Schutzbarriere und die Schutzschicht sind in einem Produkt kombiniert, wodurch mehrfaches Verpacken überflüssig wird und Sie wertvolle Zeit sparen.

INTERLEAVED

Flexibilität und Nachhaltigkeit – Bietet die Flexibilität, verschiedene Sterilbarrieren aufzubauen und die Option, die äußere Weichverpackung zu recyceln.

SINGLE SHEET

Anpassung – Ermöglicht die Zusammenstellung einer maßgeschneiderten Weichverpackungslösung für spezifische Anwendungsfälle.


SMS Weichverpackung

BONDED


Leicht (43 g/m ²)		
Artikelnummer	Format	VE
WRL5050	50 x 50 cm	252/Box
WRL6060	60 x 60 cm	150/Box
WRL7575	75 x 75 cm	96/Box
WRL9090	90 x 90 cm	54/Box
WRL100100	90 x 90 cm	54/Box
WRL120120	120 x 120 cm	54/Box
WRL140140	140 x 140 cm	36/Box
WRL100120	100 x 120 cm	54/Box
WRL100140	100 x 140 cm	36/Box
WRL120140	120 x 140 cm	54/Box
WRL130150	130 x 150 cm	54/Box

Mittel (50 g/m ²)		
Artikelnummer	Format	VE
WR5050	50 x 50 cm	150/Box
WR6060	60 x 60 cm	180/Box
WR7575	75 x 75 cm	66/Box
WR9090	90 x 90 cm	54/Box
WR100100	100 x 100 cm	54/Box
WR120120	120 x 120 cm	54/Box
WR140140	140 x 140 cm	36/Box
WR100120	100 x 120 cm	36/Box
WR100140	100 x 140 cm	36/Box
WR120140	120 x 140 cm	24/Box
WR130150	130 x 150 cm	36/Box


Schwer (60 g/m ²)		
Artikelnummer	Format	VE
WRH5050	50 x 50 cm	150/Box
WRH6060	60 x 60 cm	126/Box
WRH7575	75 x 75 cm	66/Box
WRH9090	90 x 90 cm	54/Box
WRH100100	100 x 100 cm	54/Box
WRH120120	120 x 120 cm	36/Box
WRH140140	140 x 140 cm	36/Box
WRH100120	100 x 120 cm	36/Box
WRH100140	100 x 140 cm	36/Box
WRH120140	120 x 140 cm	36/Box
WRH130150	130 x 150 cm	36/Box
WRH140180	140 x 180 cm	30/Box

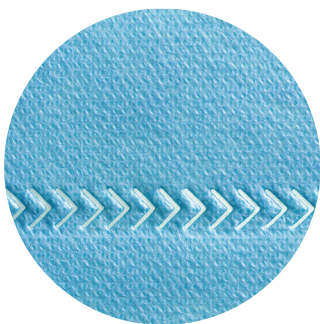


SMS Bonded Leicht
Blau

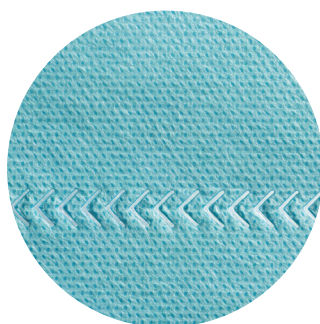

SMS Bonded Leicht
Grün

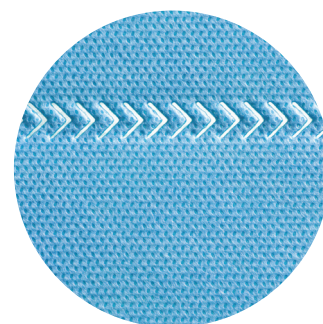

SMS Bonded Schwer
Blau

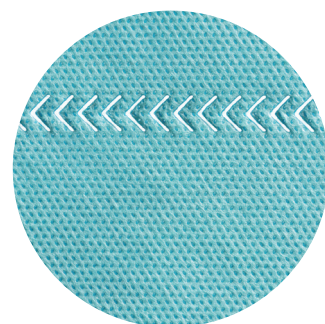

SMS Bonded Schwer
Grün

INTERLEAVED

Leicht (43 g/m²)


Artikelnummer	Format	VE
CGCBL050A	50 x 50 cm	504/Box
CGCBL060A	60 x 60 cm	360/Box
CGCBL075A	75 x 75 cm	180/Box
CGCBL090A	90 x 90 cm	150/Box
CGCBL100A	100 x 100 cm	150/Box
CGCBL120A	120 x 120 cm	102/Box
CGCBL140A	140 x 140 cm	102/Box
CGCBL1012A	100 x 120 cm	102/Box
CGCBL1014A	100 x 140 cm	102/Box
CGCBL1214A	120 x 140 cm	102/Box
CGCBL1315A	130 x 150 cm	102/Box

Mittel (50 g/m²)


Artikelnummer	Format	VE
CGCB050A	50 x 50 cm	300/Box
CGCB060A	60 x 60 cm	360/Box
CGCB075A	75 x 75 cm	180/Box
CGCB090A	90 x 90 cm	126/Box
CGCB100A	100 x 100 cm	126/Box
CGCB120A	120 x 120 cm	102/Box
CGCB140A	140 x 140 cm	102/Box
CGCB1012A	100 x 120 cm	102/Box
CGCB1014A	100 x 140 cm	78/Box
CGCB1214A	120 x 140 cm	78/Box
CGCB1315A	130 x 150 cm	102/Box

Schwer (60 g/m²)


Artikelnummer	Format	VE
CGCBU050A	50 x 50 cm	300/Box
CGCBU060A	60 x 60 cm	300/Box
CGCBU075A	75 x 75 cm	126/Box
CGCBU090A	90 x 90 cm	126/Box
CGCBU100A	100 x 100 cm	78/Box
CGCBU120A	120 x 120 cm	96/Box
CGCBU140A	140 x 140 cm	78/Box
CGCBU1012A	100 x 120 cm	78/Box
CGCBU1014A	100 x 140 cm	78/Box
CGCBU1214A	120 x 140 cm	78/Box
CGCBU1315A	130 x 150 cm	78/Box
CGCBU1418A	140 x 180 cm	60/Box

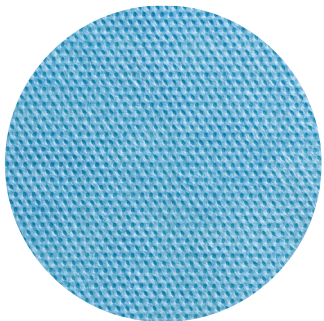


SMS Interleaved Leicht
Blau

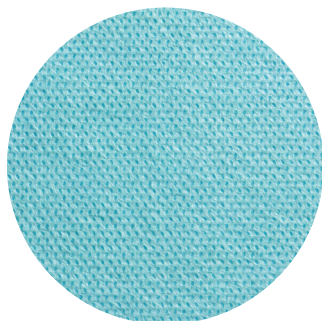

SMS Interleaved Leicht
Grün

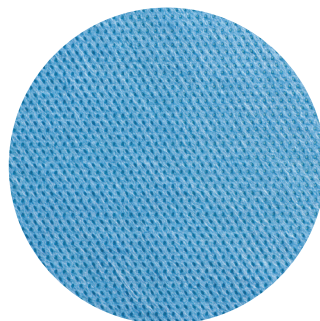

SMS Interleaved Schwer
Blau

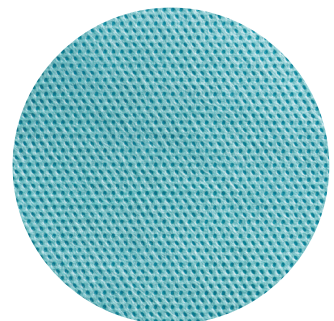

SMS Interleaved Schwer
Grün


SMS Weichverpackung

SINGLE SHEETS


Leicht (43 g/m ²)		
Artikelnummer	Format	VE
CBL050A	50 x 50 cm	504/Box
CBL060A	60 x 60 cm	360/Box
CBL075A	75 x 75 cm	180/Box
CBL090A	90 x 90 cm	150/Box
CBL100A	100 x 100 cm	150/Box
CBL120A	120 x 120 cm	102/Box
CBL140A	140 x 140 cm	102/Box
CBL1012A	100 x 120 cm	102/Box
CBL1014A	100 x 140 cm	102/Box
CBL1214A	120 x 140 cm	102/Box
CBL1315A	130 x 150 cm	102/Box

Mittel (50 g/m ²)		
Artikelnummer	Format	VE
CB050A	50 x 50 cm	300/Box
CB060A	60 x 60 cm	360/Box
CB075A	75 x 75 cm	180/Box
CB090A	90 x 90 cm	126/Box
CB100A	100 x 100 cm	126/Box
CB120A	120 x 120 cm	102/Box
CB140A	140 x 140 cm	102/Box
CB1012A	100 x 120 cm	96/Box
CB1014A	100 x 140 cm	78/Box
CB1214A	120 x 140 cm	78/Box
CB1315A	130 x 150 cm	102/Box

Schwer (60 g/m ²)		
Artikelnummer	Format	VE
CBU050A	50 x 50 cm	250/Box
CBU060A	60 x 60 cm	300/Box
CBU075A	75 x 75 cm	126/Box
CBU090A	90 x 90 cm	126/Box
CBU100A	100 x 100 cm	126/Box
CBU120A	120 x 120 cm	78/Box
CBU140A	140 x 140 cm	78/Box
CBU1012A	100 x 120 cm	102/Box
CBU1014A	100 x 140 cm	102/Box
CBU1214A	120 x 140 cm	78/Box
CBU1315A	130 x 150 cm	78/Box

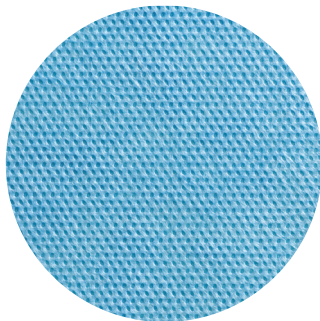

SMS Leicht
Blau

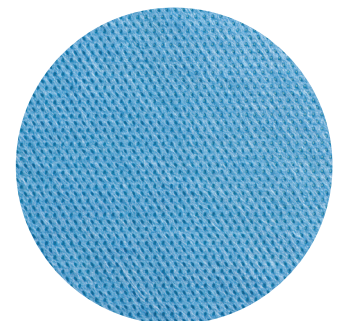


SMS Schwer
Blau

Krepp Weichverpackung

SINGLE SHEETS

Krepp Blau (60 g/m ²)			Krepp Grün (60 g/m ²)		
Artikelnummer	Format	VE	Artikelnummer	Format	VE
BLUCREPE040A	40 x 40 cm	1404/Box	GRNCREPE040A	40 x 40 cm	1404/Box
BLUCREPE050A	50 x 50 cm	702/Box	GRNCREPE050A	50 x 50 cm	702/Box
BLUCREPE060A	60 x 60 cm	702/Box	GRNCREPE060A	60 x 60 cm	702/Box
BLUCREPE075A	75 x 75 cm	348/Box	GRNCREPE075A	75 x 75 cm	348/Box
BLUCREPE090A	90 x 90 cm	252/Box	GRNCREPE090A	90 x 90 cm	252/Box
BLUCREPE100A	100 x 100 cm	252/Box	GRNCREPE100A	100 x 100 cm	252/Box
BLUCREPE120A	120 x 120 cm	126/Box	GRNCREPE120A	120 x 120 cm	126/Box
BLUCREPE140A	140 x 140 cm	126/Box	GRNCREPE140A	140 x 140 cm	126/Box
BLUCREPE1012A	100 x 120 cm	126/Box	GRNCREPE1012A	100 x 120 cm	126/Box
BLUCREPE1014A	100 x 140 cm	126/Box	GRNCREPE1014A	100 x 140 cm	126/Box
BLUCREPE1214A	120 x 140 cm	126/Box	GRNCREPE1214A	120 x 140 cm	126/Box
BLUCREPE1315A	130 x 150 cm	126/Box	GRNCREPE1315A	130 x 150 cm	126/Box

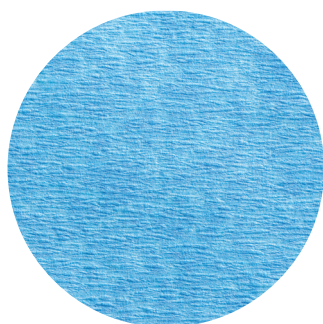

Krepp
Blau




Wetlaid Weichverpackung

SINGLE SHEETS

Wetlaid Non-Woven (52 g/m²)

Artikelnummer	Format	VE
BLUWETLD050A	50 x 50 cm	504/Box
BLUWETLD060A	60 x 60 cm	504/Box
BLUWETLD075A	75 x 75 cm	204/Box
BLUWETLD090A	90 x 90 cm	204/Box
BLUWETLD100A	100 x 100 cm	204/Box
BLUWETLD120A	120 x 120 cm	126/Box
BLUWETLD140A	140 x 140 cm	102/Box
BLUWETLD1012A	100 x 120 cm	126/Box
BLUWETLD1014A	100 x 140 cm	126/Box
BLUWETLD1214A	120 x 140 cm	126/Box
BLUWETLD1315A	130 x 150 cm	102/Box

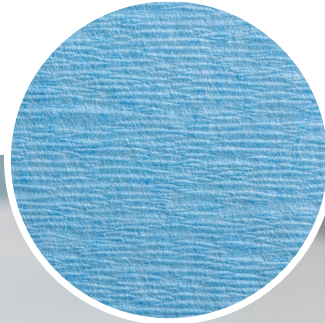

Wetlaid
Blau



KONFORMITÄT

- Anforderungen an sterile Verpackungen - ISO 11607
- Hohe Festigkeit - ISO 1924-2: 2008, ISO 1974: 2012 und ISO 2758: 2014 zur Vermeidung von Rissen, Löchern oder Beschädigungen
- Drapierbarkeit - ISO 9073-9: 2008

KONTAKTIEREN SIE IHREN LOKALEN STERIS-VERTRIEBSANSPRECHPARTNER/IN für weitere Informationen.

healthcare.steris.com/de

©2025 STERIS. Alle Rechte vorbehalten. M14185DE.2026-01, Rev.A

 **STERIS**

STERIS Deutschland GmbH
Eupener Straße 70
50933 Köln
Tel: 0221 / 466120-90
E-Mail: csde@steris.com